

Denta'Mag

CATALOGUE PRINTEMPS-ETE 2025 | BIOSUMMER DENTAL

Tél. : 09 74 355 555

www.biosummer.com

34

Usineuse Ceramill Matron Core



BioSummer
Dental



L'impression 3D Polyjet par Stratasys



Imprimantes 3D J3 Dentajet, J5 Dentajet et J5 Dentajet XL

pour la fabrication simultanée de pièces multi-matériaux biocompatibles et multicolores



J3 est l'imprimante Polyjet conçue pour les laboratoires de petite et moyenne tailles :

- idéale jusqu'à **50 éléments / jour**
- **production de plateaux mixtes de 3 matériaux**

Production de plateau mixte :
utilisez **différents matériaux en un seul lancement**
(2 matériaux avec J5 Dentajet XL, 3 matériaux avec J3 Dentajet; 5 matériaux avec J5 Dentajet)

- Imprimez en même temps un cas d'implant, un modèle dentaire, un masque gingival souple et un guide chirurgical biocompatible
- Possibilité d'utiliser plusieurs résines sur une même pièce en une seule impression

Précision des impressions

- Epaisseur de couche de 18 µm
- Sans déformation grâce aux supports sur tout le volume

J5 permet d'imprimer jusqu'à **5 matériaux** différents simultanément, en utilisant plus de 500 000 **couleurs**.

J5 Dentajet XL peut utiliser 2 matériaux en simultanée et se distingue par la capacité des cartouches de résine (4 kgs au lieu de 1.1 kg pour J3 et J5)


Grand plateau d'impression 360° (140 x 200 x 190 mm)

- Plateau complet pour une production nocturne en gros volume
- Possibilité de plateau rapide pour de petites productions

2 modes d'impression :

- Mode standard pour la flexibilité
- Mode Vitesse élevée haute qualité (HQHS) pour une productivité accrue

Post-traitement minimal : polymérisation UV de chaque couche pendant l'impression, nettoyage à l'eau

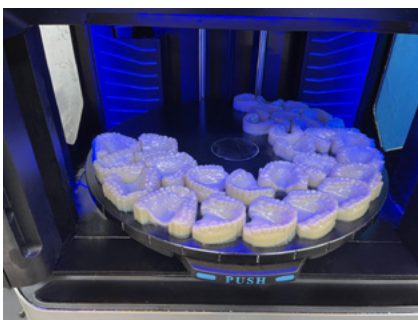

Stratasys J3 configuration model :

location sur 36 mois à partir de 972 € / mois



Les imprimantes 3D Shining 3D



**AccuFab-L4D,
idéale pour la production
de petites impressions
de grande valeur**

- plate-forme en céramique, avec 2 formats d'impression :
192 x 120 x 180 mm ou 70 x 70 mm x 150 mm
- bac à résine compact
- avec une durée de vie jusqu'à 120 000 couches
- précision à +/- 50 µm
- vitesse d'impression : 50 mm/h max
- épaisseur de couche : 50 à 100 µm
- système de matériaux ouvert

3 479 €



**AccuFab-CEL s'impose par
sa vitesse d'impression
ultra-rapide**

Modèles d'orthodontie : 14 minutes
Guide chirurgical : 20 minutes
Couronne et bridge : 11 minutes
Modèles d'implants : 20 minutes
(en épaisseur de couche 100µ)

AccuFab-CEL

- vitesse d'impression jusqu'à 100 mm/h
- plate-forme en céramique multi-tailles
- avec un volume d'impression maxi : 192 x 120 x 180 mm
- précision à +/- 35 µm
- épaisseur de couche : 50-100 µm
- système de matériaux ouvert
- contrôle permanent de la température et de l'humidité de la cabine

6 000 €



**IDS
2025**

**AccuFab-F1,
optimisé pour les
prothèses
de haute qualité
pour les cas All-on-X**

AccuFab-F1

- précision accrue à +/- 25 µm
- vitesse d'impression remarquable jusqu'à 150 mm/h
- réservoir spécial de résine Hyperclear pour la fabrication de gouttières avec une transparence optimale
- film de réservoir à relâchement rapide
- détection intelligente fournissant des indications claires pour un fonctionnement sans erreur

9 599 €





L'impression 3D par Formlabs

**Une impression ultra-rapide,
une précision inégalée
avec Form 4, Form 4B et Form 4BL**

**Ces imprimantes 3D nouvelle génération
redéfinissent les normes du secteur en matière de rapidité,
de précision, de fiabilité et de diversité des matériaux.**

Form 4B et maintenant Form 4BL permettent l'impression
des dispositifs biocompatibles et stérilisables
plus rapidement que jamais.



Avec un volume d'impression 4.6 fois
plus important que la Form 4B,
la nouvelle **Form 4BL** est l'imprimante dentaire
grand format la plus rapide du secteur,
soit un rendement 1.8 fois supérieur à la Form 4
et 3 fois moins d'interventions manuelles.
Elle offre aussi la flexibilité des matériaux
grâce aux résines biocompatibles Formlabs
et au mode "matériau ouvert"

La Form 4BL Build Platform peut contenir
jusqu'à 32 modèles,
imprimés en seulement 15 minutes en utilisant Fast
Model Resin et une épaisseur de couche de 160 µm,
pour un rendement total équivalent à
plus de 100 modèles par heure.
Vous pouvez aussi imprimer jusqu'à 28 modèles de
restauration en 2 h 48 min, en utilisant Precision Model
Resin et une épaisseur de couche de 50 µm.

Form 4 Basic Package

4 199 €

Les packages

- Imprimante **Form 4**
- bac de résine
- mélangeur de résine
- plate-forme de fabrication
- kit de finition

5 219 € - **1020 €**

Form 4B Basic Dental Package

7 463 €

- Imprimante **Form 4B**
- bac de résine
- mélangeur de résine
- plate-forme de fabrication Flex
- kit de finition
- Dental Service Plan 1an

Form 4B Complete Dental Package

9 538 €

- Imprimante **Form 4B**
- bac de résine
- mélangeur de résine
- plate-forme de fabrication Flex
- kit de finition
- Dental Service Plan 1an
- Form Wash (2ème version)
- Form Cure (2ème version)
- pompe à solvants pour Form Wash



Form Cure 2nd Generation, pour une post-polymérisation ultra-rapide



Permet de post-polymériser
les résines standard en 60 secondes
ou **les résines biocompatibles**
en 3 à 15 minutes

- une puissance UV 4 fois plus élevée
- un chauffage quasi instantané
- une chambre 1,3 fois plus grande

Compatible avec Form 4/4B/4L/4BL,
Form 3/3L/3B/3BL, Form 2

1 199 €





L'imprimante 3D NextDent 5100

NextDent 5100 est équipée du logiciel 3D Sprint et est dotée de la technologie Figure 4 TM qui lui permet d'atteindre une vitesse d'impression hors pair jusqu'à 14 cm/heure.

Le bac à membrane sans contact permet une impression sans rétraction et une élimination facile des supports.

- Technologie d'impression : DLP
- Volume d'impression : 124.8 x 70.2 x 196 mm
- Taille (sans pied) : 426 x 489 x 971 mm
- Résolution pixel : 65 µm
- Résolution verticale : 25 - 100 µm
- Longueur d'onde : 405 nm

12 977 €

~~14 419 €~~ - 1 442 €



-10% sur les imprimantes NextDent en stock

Filtres pour imprimantes NextDent 5100

480225 Filtre d'admission (à air)	33,50 €
480220 Filtre à charbon	65,90 €

Isolants des modèles imprimés en 3D

SR Ivocron separator

Gel d'isolation élastique, convenant aussi à l'isolation des modèles imprimés en 3D

550085-1 Tube de 30 ml **25,10 €**

Isolant Imprimo

Isolant Scheu par application d'un film mince de micro-perles de cire à la surface du modèle 3D

6510.1 Flacon de 65 ml avec pinceau **37,60 €**

Palaferm

Agent séparateur Kulzer à base de silicone qui isole les modèles en plâtre ou en résine, y compris imprimés en 3D, des résines

66094668 Flacon de 80 ml **65,10 €**


Simplex Model Isolation

Isolant Renfert qui s'enlève entièrement à l'eau pour les modèles fabriqués par impression 3D à filament ou par procédé SLA/DLP

1735 0010 Flacon de 80 g **40,70 €**

Douilles STECO

Douilles en titane pour la pose d'implants et la fabrication de guides chirurgicaux

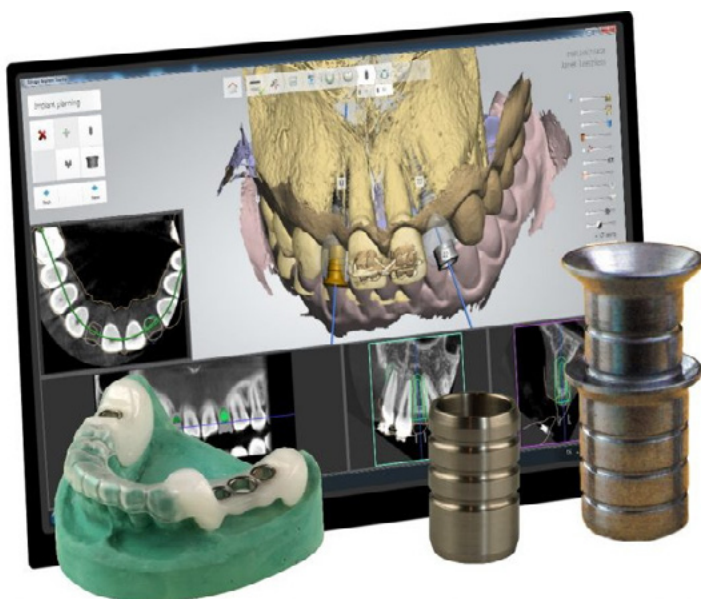

Douilles simples

Diamètre extérieur : 3.0 mm
Diamètre intérieur : 2 ou 2.35 mm
Longueur : 5 mm
Pour forets pilotes standard



Douilles doubles universelles

Douilles externes ou externe ouverte
Diamètre extérieur : 4 ou 5 mm
Diamètre intérieur : 3.5 mm
Longueur : 6 mm

Douilles internes (évasée ou plate)
Diamètre extérieur : 3.5 mm
Diamètre intérieur : 1 à 2.80 mm
Longueur : 5 ou 6 mm



Douilles pour kit chirurgical

Pour gamme d'implants Ankylos, Astra, BioHorizons, Camlog, Nobel Biocare, MIS, Straumann, Sweden&Martina, XIVE, Zimmer





ceramill® matron



Usineuse 5 axes hybride avec chargeur de disques / blocs


Première usineuse de cinquième génération,
Ceramill Matron se démarque très nettement
des générations précédentes. Ses propriétés exceptionnelles
lui confèrent une robustesse,
une rapidité et une fluidité de travail supérieures
à celles des usineuses classiques

- **Bras innovant Vmax** synonyme de robustesse et précision maximales
- **Chargeur de disques / blocs** (8 emplacements)
- **Gestion RFID des outils** et des pièces
- **Écran tactile 21,5"**
- **Usinage tous matériaux** : zircone, PMMA, cire, composite, blocs vitrocéramiques, métaux (CoCr et Ti), premills (Medentika, DESS, Preat)

Dans le flux éprouvé d'Amann Girrbach, Ceramill Matron est le **produit innovant** pour les laboratoires de prothèses souhaitant optimiser leurs flux numériques, avec des exigences élevées de qualité, rentabilité et confort de travail.

Bras robuste et innovant : axes A/B à 45°
Broche puissante : 1370 W / 80 000 t/min
Fraises 3 mm ou 6 mm
Magasin d'outils / magasin de disques (x 8)
Autocalibration

Prix : à partir de 1 253 € / mois*
Nous consulter

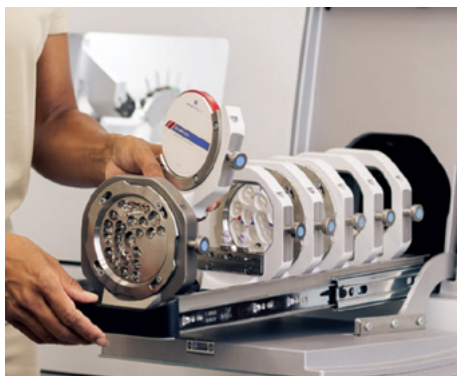

*Financement en LOA sur une durée de 84 mois, sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur



ceramill® motion 3 air

Usineuse 5 axes hybride

Excellente qualité de production

Rapidité d'usinage

Interactif - Flux de travail guidé sur écran 10"

Fiabilité des processus - Technologie RFID

Caméra HD - Autocalibration

Gestion des fraises avec puces RFID

Compresseur intégré

Usineuse autonome / Plug & Play

**L'utilisateur a au bout des doigts
une machine conviviale et optimisée,
grâce aux gains de temps réalisés
et à la simplicité d'utilisation.**

A partir de 959 € / mois*



- Usineuse Ceramill Motion 3 Air
- Système Coolstream (pour usinage sous irrigation)
- Support de disque 98 mm
- Chariot de positionnement
- Support de blocs

ceramill® matron core

Usineuse 5 axes hybride tous matériaux

La gamme d'usineuses Amann Girrbach s'étoffe encore grâce à cette nouvelle machine dérivée de la Matron.

Plus compacte, s'intégrant facilement sur un plan de travail standard, elle possède les mêmes caractéristiques et performances en termes d'usinage.

La Ceramill Matron Core

se concentre sur l'essentiel :

- Utilisation intuitive et guidée
- Précision et rapidité des parcours d'outils
- Vitesse d'usinage

A partir de 1 106 € / mois*



ceramill® mind

Pensez aux mises à jour !

Les dernières versions des logiciels Ceramill Mind + Match 2 évoluent en permanence : nouveaux parcours d'outils pour les connexions direct implant / direct multi-units ; nouveaux catalogues de piliers pre-mill (Medentika, DESS, Preat)

*Financement en LOA sur une durée de 84 mois, sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur





Disques zircone Upcera

Offre
10 + 4

Gamme Explore : Zircone ultra-translucide, multicouche, avec une résistance à la flexion variable couche par couche
Disponible en 16 teintes A-D, en épaisseur 12/14/16/18/20/22/25 mm

Explore Esthetic :

particulièrement adapté aux unitaires antérieures et aux petits bridges
(résistance à la flexion 727-1000 MPa)

Explore Functional :

adapté à tous les types de restaurations
(résistance à la flexion de 1027 à 1300 Mpa)



98 x 12 mm	118,50 €
98 x 14 mm	127,50 €
98 x 16 mm	142,80 €
98 x 18 mm	151,50 €
98 x 20 mm	159,80 €
98 x 22 mm	175,10 €
98 x 25 mm	190,40 €



Gamme ST : Zircone super-translucide, aux propriétés mécaniques élevées (résistance de 1200 Mpa)
Disponible en white, teinté et multi-layer

ST White :

pour chapes et armatures toutes dimensions

98 x 14 mm	90,00 €
98 x 16 mm	101,00 €
98 x 20 mm	127,00 €
98 x 25 mm	153,00 €

**ST Color pré-teintée :**

pour chapes et armatures, couronnes et bridges
Disponible en 4 épaisseurs : 14/16/20/25
dans les 16 teintes A-D

98 x 14 mm	90,10 €
98 x 16 mm	100,30 €
98 x 20 mm	110,50 €
98 x 25 mm	132,60 €



ST ML multilayer,
avec un dégradé de teinte et de translucidité
pour couronnes entièrement anatomiques et bridges
Disponible en 5 épaisseurs, en teintes
A1/A2/A3/ A3.5/A4/B1/B2/B3/C1/C2/C3/D2/D3

98 x 12 mm	100,00 €
98 x 14 mm	110,00 €
98 x 16 mm	120,00 €
98 x 18 mm	130,00 €
98 x 20 mm	140,00 €





Disques zircone Amann Girrbach

Ceramill ZI :

Zircone légèrement translucide
pour structures/armatures
Résistance à la flexion de 1200 MPa
Existe désormais en épaisseurs 10 et 12



767619	Epaisseur 10 mm	111,35 €
767620	Epaisseur 12 mm	127,90 €
767621	Epaisseur 14 mm	140,55 €
767622	Epaisseur 16 mm	153,20 €
767623	Epaisseur 18 mm	170,55 €
767624	Epaisseur 20 mm	183,60 €
767625	Epaisseur 25 mm	227,20 €

Ceramill HT + : Zircone hautement translucide pour full zircone, armatures et bridges complets jusqu'à 14 éléments
Résistance à la flexion de 1100 MPa



Ceramill HT + White

767664	Epaisseur 10 mm	131,70 €
767665	Epaisseur 12 mm	148,15 €
767666	Epaisseur 14 mm	160,50 €
767667	Epaisseur 16 mm	172,85 €
767668	Epaisseur 18 mm	189,35 €
767669	Epaisseur 20 mm	197,55 €
767670	Epaisseur 25 mm	230,45 €

Ceramill HT + Preshade,
pré-teintée dans chaque teinte VITA

Epaisseur 14 mm	164,30 €
Epaisseur 16 mm	179,00 €
Epaisseur 20 mm	210,20 €

Ceramill Gen-X :

Zircone hautement translucide multicouche
(une teinte par disque)
pour un usage quasi-universel
Résistance à la flexion de 1000 MPa



Epaisseur 12 mm	195,90 €
Epaisseur 14 mm	205,80 €
Epaisseur 16 mm	240,55 €
Epaisseur 20 mm	273,45 €
Epaisseur 25 mm*	319,20 €

*sauf B3/B4/C1/C3/C4/D3/D4

Ceramill FX Multilayer :

Zircone super translucide multicouche,
avec 2 teintes par disque,
pour bridges jusqu'à 3 éléments
Résistance à la flexion de 700 MPa

Teintes 0/A1, A2/A3, A3.5/A4, 0/B1, B2/B3,
B3/B4, C1/C2, C3/C4, D2/D3 et D3/D4



Epaisseur 14 mm	203,50 €
Epaisseur 16 mm	208,20 €
Epaisseur 20 mm	220,20 €

Fraises d'usinage pour zircone

Roto RFID ZI pour zircone sur Mikro 4X/5X, Motion 2/3, Matron
et Matik

760660	ZI 2.5
760661	ZI 1.0
760662	ZI 0.6
760663	ZI 0.3

71,80 €





Disques zircone Ivoclar

IPS e.max ZirCAD Prime

Zircone révolutionnaire, avec la technologie Gradient Technology, combinant un oxyde de zirconium conditionné hautement translucide en zone incisale (650 MPa) et un oxyde de zirconium conditionné très résistant en zone dentinaire (1200 MPa)

Convient pour toutes les indications, des couronnes unitaires aux bridges longue portée

Teintes A1 à D4 et BL1/2/3/4

98.5 x 14 mm	208,20 €
98.5 x 16 mm	238,80 €
98.5 x 20 mm	262,80 €
98.5 x 25 mm	318,60 €



DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar AG

Prix spécial pour les laboratoires choisissant le "contrat Lab Ivoclar".
Contactez-nous pour sa mise en place.

Bocs d'usinage

IPS e.max CAD

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar AG

Blocs de disilicate de lithium Ivoclar, disponibles dans toutes les teintes A-D en LT et HT, avec embout CEREC/in Lab ou embout PrograMill

Lot de 5 - Taille C14 et I12 **195,90 €**



Pour 5 IPS e.max CAD achetés,
1 IPS e.max CAD OFFERT*

* gratuite envoyée par Ivoclar (teinte au choix)

Initial LiSi Block

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC

Blocs de disilicate de lithium GC déjà cristallisés disponibles en teintes A1, A2, A3, A3.5 et B1 en LT et HT, avec embout CEREC/in Lab

Lot de 5 - Taille 14 **143,40 €**



Pour 4 Initial LiSi Block achetés,
1 Initial LiSi Block OFFERT*

* gratuite envoyée par GC (teinte au choix)
Offre valable jusqu'au 30/06 seulement

Brilliant Crios

Blocs de composite renforcé pour la réalisation de restaurations indirectes définitives (restaurations unitaires antérieures aussi bien que postérieures)

- Résistance à la flexion élevée
- Module d'élasticité comparable à celui de la dent pour un effet d'absorption des chocs et une sensation agréable en occlusion
- Résistance à l'usure élevée et faible abrasion sur la dent antagoniste



Disponible en LT (A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/B3/C2)
et en HT (A1/A2/A3/B1),
avec embout CEREC

DM classe IIa - CE 0123 - Fabricant : Coltène Iberia

Lot de 5 - Taille 14 **155,30 €**

Fraises d'usinage diamantées

Roto RFID Diamond (3mm)

pour vitrocéramique, disilicate de lithium et céramique hybride sur Mikro IC, Motion 2/3, Matron et Matik

760676 Diamond 1.8	51,90 €
760677 Diamond 1.4	48,65 €
760678 Diamond 1.0	48,65 €
760679 Diamond 0.4	48,65 €



Roto RFID Diamond BLG (3mm)

pour disilicate de lithium sur Motion 2/3, Matron, Matik et Motion DRS (avec speedlining)

751004 Diamond BLG 2.0	65,70 €
751006 Diamond BLG 1.0	65,70 €
751008 Diamond BLG 0.4	65,70 €



-15 %

sur les plaques
de thermoformage

Erkodent

Erkoflex,

Erkoflex-Bleach,

Erkodur et

Erkoloc-pro

(rondes Ø120 mm
et carrées 125x125 mm)

Thermoformeuses

Termoplast II

Thermoformeuse Mestra simple et robuste

- Pour plaques carrées (125x125 mm) ou rondes (de diamètre 125 mm)

R-080542 L'appareil ~~982,25 €~~ - 10 % **868,00 €**

Erkoform-3d+

Thermoformeuse Erkodent, sans processus de thermoformage automatique, équipé d'un chauffage éliminant tout temps de préchauffage et avec contrôle de température de la plaque sans contact

- pour plaques d'un diamètre de 120 mm jusqu'à 5.5 mm d'épaisseur

188600 L'appareil ~~2625,45 €~~ - 5 % **2 485,00 €**



Accessoires de thermoformage

Granulés

Granulés Erkodent en acier inoxydable pour remplir le pot à granulés des appareils de thermoformage

110852 Pot de 1.3 kgs **72,95 €**

Ciseaux

Ciseaux Erkodent pour découper tous les matériaux de thermoformage souples et les matériaux durs jusqu'à 1mm

220301 La paire XL ~~60,50 €~~ - 15 % **51,00 €**

Disques à polir

Lisko

Disques à structure ouverte pour travailler les matériaux souples - 3 grains : gros (brun), gris (moyen), blanc (fin)

22310.. Boite de 10 disques
(+ disques de support et mandrin) **29,40 €**

Lisko-S

Disques à structure semi-ouverte pour pré-polir et travailler les matériaux souples et pré-polir les matériaux durs

223200 Boite de 10 disques
(+ disques de support et mandrin) **46,25 €**

Résines dépouilles photopolymérisables

Die-Bloc

Composite Yeti pour contre-dépouille en gel
890-1201 Seringue de 2 ml

25,80 €

Block Out gel

Matériau de comblement VOCO
1661 Lot de 4 seringues de 1.2 ml

94,80 €

Cenit L

Résine de blocage Dreve
3815 Lot de 4 seringues de 2.5g

123,75 €





Céramique Ivoclar

ivoclar

IPS Style ceram

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-métallique basse fusion associant 3 types de cristaux (leucite, fluorapatite et oxyapatite) assurant résistance et contrôle de l'expansion, luminosité et vitalité, contrôle de la translucidité et de l'effet de profondeur

**4 IPS Style de poids identique achetées
(20g ou 100g ou paste opaque 5g)**

=

1 IPS Style de poids identique OFFERT*

**Offre
4 +1**



IPS InLine

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-métallique renforcée à la leucite, offrant des propriétés mécaniques et optiques remarquables, tout en étant facile d'utilisation

**4 IPS InLine de poids
identique achetées
(20g ou 100g ou opaque 3g)**

=

**1 IPS InLine
de poids identique OFFERT***

**Offre
4 +1**



IPS e.max Ceram

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-céramique fluorapatite pour la stratification des armatures en disilicate de lithium et en oxyde de zirconium

**4 IPS e.max Ceram 20g (dont e.max Ceram Power)
achetées**

=

1 IPS e.max Ceram 20g OFFERT*

**Offre
4 +1**



* gratuité envoyée par Ivoclar
Attention : les poids ne peuvent être panachés - Gratuité sur le produit le moins cher

Céramique GC

'GC'

Initial MC

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Système céramo métallique le plus avancé de GC, pour toutes les techniques de coloration et de stratification

**5 Initial MC de même format achetées
(20g ou 50g ou 250g ou paste opaque 3g)**

=

1 Initial MC de même format OFFERTE**

**Offre
5 +1**



Initial Zr-Fs

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Céramique spécialement développée pour la stratification des armatures en oxyde de zirconium

**5 Initial ZR-Fs de même format achetées
(20g ou 50g ou 250g)**

=

1 recharge OFFERTE**

**Offre
5 +1**



**gratuité envoyée par GC

Attention : les poids ne peuvent être panachés - Gratuité sur le produit le moins cher
Offre valable **jusqu'au 30/06 seulement**

IPS Ceramic separating liquid

Isolant plâtre - céramique



593403 Flacon 15ml avec pinceau **38,40 €**

Initial INmetalbond

Pâte prête à l'emploi assurant une couche intermédiaire entre les céramo-métal et les alliages dentaires



10003154 2 seringues de 4g **100,55 €**



Céramique pressée

IPS e.max Press

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramique pressée éprouvée, permettant une garantie de 10 ans sur vos restaurations !

**4 tubes d'e.max Press LT / MT / HT / MO / HO
(5 pièces) achetés**

**=
1 e.max Press (5 pièces) OFFERT***

**Offre
4 + 1**



* gratuite envoyée par Ivoclar

Initial LiSi Press

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Céramique pressée GC sans pratiquement aucune couche de réaction !

**Offre
4 + 1**

**4 tubes de LiSi Press
LT / HT / MT / MO achetés**

**=
1 LiSi Press OFFERT****



** gratuite envoyée par GC
Offre valable jusqu'au 30/06 seulement

Maquillants céramique

IPS Ivocolor

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Maquillants et glasures Ivoclar universels pour les restaurations en zircon, disilicate de lithium, tout-céramique ou céramo-métallique

**4 Ivocolor Shade et/ou glaze paste 3g
achetés**

**=
1 Ivocolor 3g OFFERT***

**Offre
4 + 1**



* gratuite envoyée par Ivoclar

Initial IQ Lustre Pastes ONE

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Maquillants GC, sous forme de pâte pour céramique, disilicate de lithium et zircon : body shade (A/B/C/D), enamel effect (L1 à L10/ L-V/L-OP) et glazure avec ou sans fluorescence (L-N et L-NFL)

**Offre
3 + 1**

3 pots 4g LP One achetés

**=
1 LP One 4g OFFERT****



** gratuite envoyée par GC
Offre valable jusqu'au 30/06 seulement

Fours à céramique Ivoclar

Bénéficiez de **15% de remise**

pour l'achat d'un four Programat (P310 / P510 / P710 / EP3010 / EP5010 / CS6) accompagné d'une pompe à vide (VP5 ou VP3 easy)

Par exemple :

747825 Le four P310 + VP5	7 992 € - 15 %	6 793 €
747827 Le four P510 + VP5	10 074 € - 15 %	8 563 €
747831 Le four EP 3010 + VP5	14 280 € - 15 %	12 138 €

-15 %





Résines autopolymérisables

SR Triplex Cold

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Résine auto Ivoclar, pour les prothèses partielles et combinées, les rebasages et les réparations

547064 2 x 500g - Teinte 36 P-V ~~90,95 €~~ - 10 % **81,85 €**

541445 500 ml ~~47,85 €~~ - 10 % **43,05 €**



Methax Auto

DM classe IIa - CE0120 - Fabricant : Makevale

Résine pour réparations, rebasages, extensions de prothèses et recouvrement de châssis métalliques

9750 1 kg - Rose veiné ~~96,95 €~~ - 15 % **82,40 €**

9900 500 ml ~~49,10 €~~ - 15 % **41,75 €**

9860 5 kg - Rose veiné **313,50 €**

9865 2.5 L **146,10 €**

9650 Kit comprenant 1 kg de poudre et 500 ml de liquide **105,00 €**

Résines injectées

PERform

DM classe IIa - CE0297 - Fabricant : Coltène

Résine à cuire Coltène pour la réalisation de prothèses complètes ou partielles avec le système PERform

DM AC32 1 kg - Rose veiné **127,35 €**

DM L2 1 litre **120,45 €**


SR Ivobase

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Résine Ivoclar : SR Ivobase Hybrid pour tous types de prothèses amovibles ou SR Ivobase High Impact avec une résistance plus élevée à la fracture

62888.. Ivobase Hybrid **285,35 €**
Carton de 20 cartouches
Teinte Preference ou Pink-V ou Pink

62889.. Ivobase High Impact ~~322 €~~ - 10 % **289,80 €**
Carton de 20 cartouches
Teinte Preference ou Pink-V

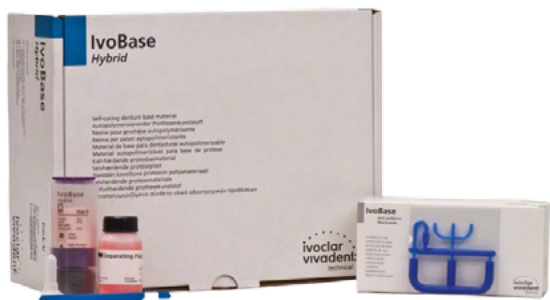

Résines provisoires

VITA VM CC

DM classe IIa - CE0124 - Fabricant : VITA Zahnfabrik

Résine non chargée polymérisable à froid pour la réalisation de provisoires

Disponible dans toutes les teintes VITA (sauf B1)

C474... Flacon de 30 g **33,75 €**

CVCCL30 Liquide de 30 ml **37,80 €**

CVCCL100 Liquide de 100 ml **111,10 €**

Composites

SR Nexco

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Composite photopolymérisable Ivoclar offrant opalescence et fluorescence naturelle grâce aux micro-charges opalescentes

Offre 4 + 1
4 seringues SR Nexco achetées = 1 seringue SR Nexco OFFERTE*



* gratuite envoyée par Ivoclar
Gratuité sur le produit le moins cher



GC Acrylic Primer

Primer GC photopolymérisable pour améliorer l'adhésion des composites aux résines conventionnelles

10003646 Flacon de 6 ml **86,00 €**

Polissage

Pala Polish

Pâte à polir Kulzer à fort pouvoir de brillance pour le polissage des prothèses dentaires, des appareils orthodontiques et des matériaux composites



66067855 Pot de 80 g **47,45 €**

Polistar

Liquide à polir Hatho pour le grand brillant des résines, alliages précieux et composites dentaires



313139 Flacon de 125 ml **9,85 €**



Micromoteurs



Ultimate XL (NSK)

Micromoteur sans charbon, modèle Torque, avec commande genou, commande pied ou modèle table

- Vitesse jusqu'à 50 000 tours/min (genou et table) ou 40 000 tours/min (pied)
- Couple max : 8.7 Ncm

Y141495 Le micromoteur modèle genou

Y141513 Le micromoteur modèle pied

Y141471 Le micromoteur modèle table

1 825 €

**Offre
3 + 1**

Pour 3 micromoteurs achetés
(modèle au choix)

=
1 turbine Presto II OFFERTE
d'une valeur de 1 168,50€



Matériel Renfert

Pour fêter ses 100 ans, Renfert vous offre en 2025
un an de garantie supplémentaire
sur tous ses appareils,
en plus des 3 années de garantie déjà accordées

100 years making work easy

3 + 1 year
guarantee

Suivez le guide



Sableuse Basic Eco



Microsableuse avec 2 silos
(25-70 µm et 70-250 µm)
et 2 buses de sablage
(0.8 et 1.2 mm)

- Volume de la cabine de sablage : 10 L

2949 2025 Basic Eco

~~1 318,80 €~~ - 16 % **1 105 €**

Aspiration Silent Compact

Aspiration monoposte
sans sac à poussière
équipée d'un système de
nettoyage automatique et
d'un moteur à collecteur
possédant une grande
longévité



2934 0000 Silent compact

~~1 733,40 €~~ - 11 % **1 542 €**

Aspirations pour unité FAO

Aspirations sans sac à poussière
équipées de système de nettoyage automatique du filtre

- Pour les unités FAO compactes :

2934 2000 SILENT compactCAM ~~1 849 €~~ - 15 % **1 572 €**

- Pour les unités FAO moyennes à grandes :

2938 0000 SILENT powerCAM TC ~~2 784 €~~ - 15 % **2 368 €**

SILENT compactCAM et Silent powerCAM TC
sont équipées d'un moteur à collecteur innovant
(durée de vie 3 fois plus longue)

- Pour les unités FAO fortement sollicitées :

2939 0000 SILENT powerCAM EC ~~3 559 €~~ - 15 % **3 026 €**

SILENT powerCAM EC est équipée
d'un moteur EC sans balai
(durée de vie garantie de 5000 heures de service)



Offres sur les aspirations pour unités FAO
valables uniquement **jusqu'au 31/05**



Gamme de mobilier Drakkar

Les **établis Drakkar** sont spécifiquement adaptés aux besoins des prothésistes, en s'adaptant à la configuration de votre laboratoire .

Tous les établis comprennent :

- plan de travail en hêtre massif 25 mm
- tiroirs de rangement
- étagère porte-travaux
- rampe d'éclairage fixe
- soufflette air comprimé à rappel
- cheville de grattage PVC
- plaques inox de travail
- appui-bras
- pieds chromés

En option,

- éclairage mobile
- cheville bois aspirante
- plan de travail élargi à 70 cm...

Couleurs au choix



Agencement
selon vos besoins

Accessoires pour établi

Lampe de table (Mestra)

Lampe à haut rendement (84 LED) avec bras articulé compact et pince d'accroche pour établi

- Intensité lumineuse réglable
- Sans scintillement



R-100288 Lampe avec pince

130,00 €

Soufflettes (Mestra)



R-050220

Soufflette raccord rapide
Pour tuyau Ø 8

R-050221

Soufflette raccord à visser
Pour tuyau Ø 6

R-050220 ou R-050221 La soufflette

42,70 €

Cheville aspirante (Zubler)



Cheville R1250

Bouche aspirante avec vitre de protection rabattable



Cheville R2200

avec grande glace de protection en verre de sécurité et tablier en plastique



Canal simple R1000

pour tuyaux Ø36 ou 40 mm et cheville R1200 et R1250

825/236 La cheville R1250

335,00 €

825/231 La cheville R2200

305,60 €

570/065 Le canal R1000

129,50 €